


Letto AERYS®

QUESTO PRODOTTO È CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE. È STATO PROGETTATO E FABBRICATO SECONDO LE NORME IN VIGORE ED IN PARTICOLARE SECONDO LA NORMA CEI 60601-2-52.

Grazie a uno stile sobrio che si distacca dall'ambiente medico ed a numerose funzionalità, permette di adattarsi alle varie patologie degli ospiti e favorisce l'ergonomia del personale curante.

- **Il contenitore di controllo del letto AERYS contiene un nuovo software di gestione elettronica. Il letto AERYS è dotato di serie di:**
 - Una memorizzazione dell'altezza variabile al fine di personalizzare e facilitare l'uscita del paziente dal letto.
 - Un accesso tramite un tasto alla funzione poltrona.
 - Un arresto in posizione -5° in declivio che permette il rialzamento del paziente nel proprio letto.
 - Una posizione Trendelenburg (declivio) a -12° per le emergenze.
- Se scegliete l'opzione (t) carrello della testiera multidirezionale, un bip sonoro e un arresto di 3 secondi vi indicheranno il passaggio dalla posizione frenata alla posizione non-frenata. Potrete anche scegliere il colore del rivestimento epossidico del vostro letto tra il nostro campionario di colori.



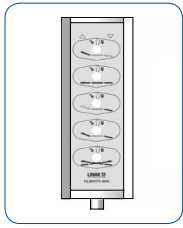

Telecomando via cavo 5 funzioni



Altezza variabile 24,5 - 80 cm

Pedale: frenatura centralizzata (2)

(2) OPZIONI & ACCESSORI

(1) CPR - Cardio Pulmonary Resuscitation

- Rotelline DESIGN Ø 75mm
- Frenatura centralizzata su sistema di spostamento pediera
- Alzabusto elettrico CPR
- Piano dormita in materiale compatto amovibile
- Sistema di spostamento multidirezionale ø 4 rotelline 75 mm testiera
- Gamma SAM ERGONOM, EVOLUTION, ACTIV
- Batterie
- Telecomando su braccio flessibile
- Telecomando personale curante
- Telecomando ad infrarossi
- Prolunga di rete
- Arresto da parete
- Vari colori di rivestimento epossidico a scelta

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	ALTEZZA VARIABILE	ALZABUSTO	ALZAGAMBE	CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO	ROTELLINE	NORME	TENUTA STAGNA	DECLIVO	PROCLIVIO
AERYS										
2 funzioni elettriche senza plicatura e proclivio	90 x 200 cm Rete non divisibile a doghe metalliche saldate	24,5 cm - 80 cm	70°	Plicatura delle ginocchia 26° e 16° regolazione dei piedi mediante cremagliera	Peso paziente 165 kg, accessori 15 kg, materasso 20 kg Ambiente 3, 4 senza funzione proclivio/declivio e 5	Carrello testiera rotelline in metallo fisse Ø 100 mm Carrello pediera rotelline multidirezionali frenatura individuale Ø 75 mm	CEI 60601 CEI 60601-2-52	Motorizzazione e contenitore LINAK IP66 Telecomando 5 funzioni bloccabile LINAK IP54	- 12° max.	+ 17° max.

Garanzia struttura meccanica, martinetti e telecomando 5 anni*
 Garanzia pannelli e accessori 1 anno*
 *In condizioni normali d'utilizzo e tranne pezzi sottoposti ad usura - vedi istruzioni riportate nel nostro manuale per l'uso.

