

# ALMOFADA ALOVA® PERFILADA



ALMOFADA MOLDADA COM ZONA DE APOIO PARA O CÓCCIX EM MATERIAL VISCOELÁSTICO. PARA UTILIZADOR COM PESO DE ATÉ 200 KG.

- **Eficácia:** o material viscoelástico ALOVA® favorece a imersão das partes do corpo em contacto com o suporte, para reduzir os valores máximos de pressão.

Zona de apoio para o cóccix que permite reduzir o risco de escaras. Redução máxima do risco de escaras na zona isquiática (altura > a 6 cm).

- **Segurança:** almofada declinada para evitar deslizamentos para frente, proteção integral, zona inferior antideslizante.
- **Conforto:** Tecido transpirável que melhora a termorregulação.



- **Disponível com batente pélvico.**

Batente de apoio pélvico para reduzir o deslizamento para frente. Altura >8 cm.

Ao escolher uma almofada ALOVA® com batente pélvico é muito importante considerar o sexo e o peso do utilizador. Para o sexo masculino, devido à constituição corporal, recomenda-se escolher uma almofada com maior profundidade para que o utilizador se sinta confortável. Para o sexo feminino este aspeto não é tão importante e a escolha deve ser feita em função do peso.

# ALMOFADA VISCOELÁSTICA ALOVA® PERFILADA

## EFICÁCIA


- Conforto
- Abdução do quadril. Rotadores externos.

- Melhora das transferências. Aumento do raio.

- Prevenção de úlceras de decúbito sacrococcígeas. Zona de apoio para o cóccix.

- Redução do risco de quedas. Inclinação do assento.

- Reforço para a prevenção de escaras isquáticas. Zona de apoio para o cóccix. Espessura > 6 cm

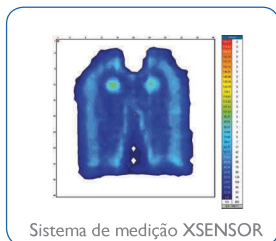

Cartografia dos valores da distribuição das pressões para um paciente de 172 cm e 80 kg



Identificação das medidas da almofada sobre a espuma



Etiqueta traseira do envoltório com as dimensões.

- Aba situada debaixo da almofada: menor risco de rasgos e maior higiene.
- Parte inferior antideslizante. Envoltório de proteção extraível.



**Ergonomia:** 16 tamanhos e 3 alturas: para pacientes com peso de até 200 kg.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (cm)	LARGURA (cm)	ALTO (cm) Mín. / Máx.*	PESO PACIENTE Kg	ENVOLTÓRIO	PROTEÇÃO CONTRA O FOGO
<b>ALOVA® Ergonómica</b>	VCAE/M4343	43	43	9	30 a 100	Proteção integral em Promust PU (tecido elástico revestido com poliuretano) cor em preto na parte superior e em cinzento na parte inferior e laterais.  Parte inferior antideslizante em tecido PU/PVC  As almofadas são fornecidas com dois envoltórios.	EN 597-1 EN 597-2
<b>ALOVA® Perfilagem padronizada</b>	VCAG3636	36	36	6 / 9	20 a 80		
<b>ALOVA® Perfilagem vários tamanhos</b>	VCAG4343	43	43	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4340	43	40	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4540	45	40	6 / 9	30 a 120		
	VCAG384I	38	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG404I	40	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG434I	43	41	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4043	40	43	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4544	45	44	6 / 9	30 a 120		
<b>ALOVA® Perfilagem vários tamanhos XL</b>	VCAG5044	50	44	6 / 9	30 a 135		
	VCAG4347	43	47	6 / 9	30 a 120		
<b>ALOVA® Perfilagem vários tamanhos XXL</b>	VCAG4343XL	43	43	9 / 12	30 a 110		
	VCAG5044XL	50	44	9 / 12	30 a 135		
	VCAG5250	52	50	7 / 10	120 a 160		
	VCAG5450	54	50	7 / 10	120 a 160		
<b>ALOVA® Perfilagem Batente de apoio pélvico</b>	VCAG5650	56	50	7 / 10	120 a 200		
	VCAG6050	60	50	7 / 10	120 a 200		
	VCAG384IBP	38	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG404IBP	40	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG434IBP	43	41	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4343BP	43	43	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4544BP	45	44	6 / 9	30 a 120		
VCAG5044BP	50	44	6 / 9	30 a 135			
VCAG4347BP	43	47	6 / 9	30 a 120			

\* Altura mínima = Altura da almofada no fundo do perfil / Altura máxima = Altura total da almofada. Envoltório de proteção compatível com os produtos detergentes-desinfetantes de uso hospitalar.

3 anos de garantia

Manutenção: Envoltórios em Promust PU



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.